

Vizioteste

Visiolite®

Creat special pentru
MEDICINA MUNCII

Visiolite®
master

Visiolite®
modulus

Visiolite®
essential
"one click one test"



Gamă de dispozitive automate pentru ecranare
și exploare a funcțiilor vizuale



www.brokmedshop.ro



Gama Visiolite®

VISIOLOTE este un viziotest pentru testare a vederii, controlat de microprocesor. Lentilele se schimbă automat pentru modul aproape, departe și intermediar. Viziotestul oferă rezoluție maximă și ecran LCD.

Compact

Având o greutate redusă, este ușor de transportat. Visiolite conține o gamă variată de teste.

Adaptabil

Pentru purtătorii de lentile progresive, mutarea distanței de vedere se face fără efort, prin simpla coborâre a ochilor. 1

Ergonomic

Visiolite se înclină pentru a se adapta fiecărui pacient. De asemenea se înclină în timpul transportului și permite mai multe oportunități de conectare.

Automatic

Fără butoane și roți în componență. Visiolite este controlat doar prin telecomanda sau cu ajutorul unui software instalat, cu ajutorul unui mouse.


Rapid

Silențios: Necesită doar câteva minute pentru a efectua un test.

Inteligent

Pentru a asigura o poziție corectă a feței, un senzor 2 de detectare va rula testele doar atunci când fruntea este în contact direct cu partea special creată.

Un grup de 20 3 de LED-uri se află pe plan orizontal (temporal și nazal) dar și vertical (câmp vizual).

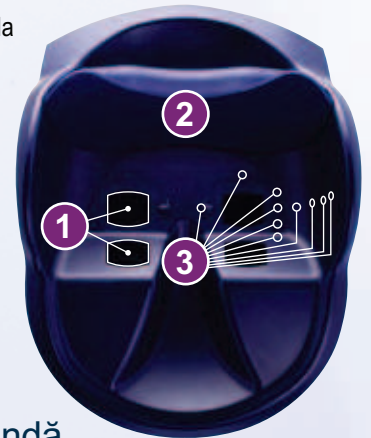

Soluții computerizate sau acționate prin telecomandă, create pentru nevoile dumneavoastră.

**Visiolite®
essential**
"one click one test"

Visiolite Essential: operativ și ergonomic prin telecomandă sau ușor de utilizat. «1 click 1 test», acest model oferă 11 teste pentru o ecranare rapidă și precisă a principalelor probleme vizuale.

**Visiolite®
modulus**

Visiolite Modulus: operativ prin software-ul Visiolite, acest model vă oferă 14 teste, incluzând toate avantajele ingineriei computerizate (această bază de date, programare de secvențe, ergonomic și cu o interfață prietenoasă).

**Visiolite®
master**

Visiolite Master: operativ prin software-ul Visiolite sau prin telecomandă cu programare afișată pe LCD, acesta este reprezentativ prin cele 18 teste ale sale, și prin modulele de operare specifice. Acest model integrează și vă pune la dispoziție întregile cunoștințe din domeniul vizual.






Compară modelele și alege-le pe cel potrivit pentru
nevoile tale !



ACUITATE VIZUALĂ

INELE LANDOLT - BINO SAU MONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NUMERE - BINO SAU MONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LITERE - BINO SAU MONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LITERE DE VEDERE SCAZUTĂ - BINO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

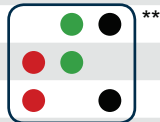

Alegere de 3 culori

TESTE SUPLIMENTARE

ASTIGMATISM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUOCROMATIC ROȘU/VERDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEREOPSIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORIA VERTICALĂ ȘI ORIZONTALĂ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUZIUNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TESTE COLOR ISHIHARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TESTE COLOR DAISY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRILĂ AMSLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SENSIBILITATE CONTRAST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST DE HIPEROPIE (LENTILĂ + 1 DIOPTRIE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CÂMP VIZUAL VERTICAL ȘI ORIZONTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICI / FUNCȚII

DISTANȚĂ			
VEDERE ÎNDEPĂRTATĂ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEDERE INTERMEDIARĂ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEDERE APROPIATĂ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUMINOZITATE			
PHOTOPIC RIDICAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PHOTOPIC SCAZUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MESOPIC (VEDERE DE NOAPTE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIUNE Bluetooth®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOD OPERARE



* Doar vedere îndepărtată

** Culoarele reprezintă configurația optotipului disponibil pe Essential, alegerea depinde de nevoile dumneavoastră.

Software-ul Visiolite V4: Interfață PC

Software-ul Visiolite V4 este operabil în portul USB și Bluetooth. Este prietenos, ergonomic cu o interfață ușor de folosit ce conferă o utilizare eficace, astfel permite efectuarea testelor în câteva minute.

Visiolite V4 poate fi personalizat pentru cerințele dumneavoastră de testare. Parametrii disponibili:

- Programarea testelor în secvențe pentru a se adapta testelor în funcție de ocupațiile profesionale ale pacienților (sau conform altor criterii).
- Parametrii testelor (modul optical, intensivitate luminoasă)
- Personalizarea instrucțiunilor oferite de către operator pacientului.
- Modul interfeței pentru exportarea rezultatelor medicale.
- Selectarea testelor de printare.

Compatibil: Windows 2000, XP, Vista & WIN 7

Accesorii & Opțiuni

BROKMED își rezervă drepturile de a modifica prețurile fără nici-o modificare în prealabil.

Accesorii standard

1 manual de utilizare
1 cablu de alimentare
1 piesă senzor frunte
1 microfibră optică

Versiunea Essential

1 telecomandă Essential
1 pad cu 100 forme de răspuns
1 tabel cu răspunsuri

Versiunea Modulus

Computerizat
1 software Visiolite
1 port USB

Telecomandă
1 pad cu 100 forme de răspuns
1 tabel cu răspunsuri

Accesorii opționale

Echipament computer
Carcasă transport
Carcasă transport metalică
Pad cu 100 forme de răspuns
Microfibră optică
Piesă senzor frunte



Interfață: mod testare

Identificare pacient

Parametrii

Caracteristici Generale:

Opțiuni operare	Versiunea Master Modulus : Software Visiolite cu port USB și conexiune wireless și Bluetooth. Versiunea Master : Telecomandă cu control imagine fundal. Versiunea Essential : Telecomandă <one click one test> (un click un test). Dispozitiv în poziție de lucru: max. 50 cm
Înălțime	
Lățime	Lățime maximă la bază: 26 cm
Greutate	Fără sistem de operare: 4.7 kg (fără telecomandă)
Intensitatea luminii	Luminare cu 16 LED-uri albe operate de către un microcontroler și un sistem de difuzare.
Distanțe	Vedere îndepărtată: 5 m Vedere intermediară: 60 cm Vedere apropiată: 33 cm
Test bandă	Film fotografic de înaltă definiție.
Reactivitate	Timput dintre 2 teste alăturate: 2 secunde Timput de trecere de la o lentilă la alta: 1,5 secunde
Timput test	Timput de rulare a unui test: 2 minute Test extins: 4 minute
Caracteristici Electrice:	
Clasă electrică	Clasa III BF alimentată cu un cablu de alimentare conform standardului EN 60601.
Voltaaj	de la 11 la 15 V
Conformitate:	
Standarde	Specificațiile testelor definite în conformitate cu NF EN ISO 8596 standardelor Oftalmologice și Optice, de testare a acuității vizuale.
Marketing CE	Dispozitiv medical clasa I conform directivei 93/42/EC
Siguranță	standard EN 60601-1
Compatibilitate	standard IEC 60601-1-2

Import aparatură medicală, dotări cabinete, dotări ambulanțe, soluții de finanțare, service
Telefon: 0742-788.641, 0732-142.489
Telefon/Fax: 0267-313.769
Sfântu Gheorghe - Avântului nr.3
E-mail: office@brokmed.ro Web: www.brokmed.ro, www.brokmedshop.ro

J14/361/2008, CUI: RO24109723



BROKMED ROMÂNIA
www.brokmedshop.ro